

## 選べるカラー



## 様々なシーンで



## 使用例

こった部分にピンポイントであてることができます。



## 製品仕様

販売名 クッションマッサージ めぐり  
品番 MCR8116  
定格電圧 AC100(50/60Hz)  
定格消費電力 11.5W(電動機7.0W・電熱部4.5W)  
定格時間 15分  
製品サイズ W340×D235×H110 mm  
製品質量(重量) 約1.5kg (ACアダプター含む)

材質 本体:ウレタン、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合樹脂)  
本体カバー:ポリエステル  
生産国 中国  
J A N 4969182511925(ブラウン)  
4969182512038(レッド)  
4969182512045(ネイビー)  
医療機器認証番号 228AG8ZX00102000

## 安全に関するご注意

ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

●本製品は一般家庭用マッサージ器です。絶対に業務用として使用しないでください。また、直接骨部にあたる部位には使用しないでください。●医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。

例: 血栓(血塞)症、肩凝り(肩)、急性筋断裂(肩)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など

●医師の治療を受けている方や、下記に該当する方は、必ず医師に相談のうえ、その指示に従ってください。

○ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人。○悪性しゅよう(癌)のある人。○心臓に障害のある人。○温度感覚喪失のある人。○妊娠初期の不安定期または出産直後の人。○糖尿病などによる高度な末梢(脚)神経障害からくる知覚障害のある人。○皮膚に創傷のある人。○安静を必要とする人。○体温38℃以上(発熱)の人。例1) 急性炎症症状【けん(膝)捻挫、悪寒、悪寒、血圧変動など】の強い時期。例2) 寒湿しているとき。○骨粗しょう(骨)症の人。せきつい(骨)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど。急性【とう(痔)漏】疾患の人。○けがをしている人。○かたが治療を受けたところ、また疾患部へ使用する人。○骨髄に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人。○その他、医療機関で治療中の人。○上記以外に身体に異常を感じている人。

●うつ伏せ、仰向けの姿勢で顔面や顔面に使用しないでください。けがや事故の原因となります。●本体のすき間には絶対に手・足などを入れないでください。けがや事故のおそれがあります。●カバーが破れた状態では使用しないでください。けがや事故のおそれがあります。●本機の連続使用耐久時間は最高15分です。15分以上の連続動作はおやめください。また、ご使用後1時間はご使用にならないでください。故障の原因になります。●マッサージは15分以上しないでください。また同じ部位へ3分以上マッサージしないでください。身体へ必要以上の刺激を与え、逆効果となるおそれがあります。●本製品をテレビやラジオの近くでのご使用とされますと、テレビの画像やラジオの音声にノイズ(雑音)が入ります。その際は、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。●湯気、湿気の多い場所や室温が10℃以下35℃以上の状態では使用にならないでください。正常に作動しなくなるおそれがあります。製品の劣化も早めます。●機器の上に立ったり、無理に体重をかけるご使用はおやめください。●その他、付属の取扱説明書に記載されている内容をお守りください。

## 取り扱い方法・その他ご不明な点は

アルインコフィットネス カスタマーサービス課  
0120-30-4515  
受付時間 AM10:00~PM4:00(平日PM12:00~1:00、土日祝除く)  
アルインコ株式会社  
フィットネス事業部 大阪府高槻市三島江1-1-1  
<http://www.alinco.co.jp/>

※ 製品の色調は印刷物と実物と多少異なることがあります。  
※ 改良のため、仕様・外観を一部変更している場合があります。  
※ 日本国内でご使用ください。

## お問い合わせ、ご相談は当店へ

FNLJEE- Ver 1.0

# 深く、こりに効く



MCR8116

arela  
クッションマッサージ めぐり



詳しい使用方法を動画でご覧いただけます。

疲れすっきり。  
気持ちいいクッションマッサージ

## 深く、こりに効く

しっかり気持ちいい、もみごこち

### “4つのもみポイント”設計のもみ玉



左右のもみ玉にそれぞれ「大小4つの突起」が設計されており、疲れた部位をぐいぐい押して、しっかりとこりをもみほぐします。

### あったかヒーター



人肌程度に部位を温める「あったかランプ」を搭載。じんわり温まりマッサージをアシストします。

### 強弱の負荷調節ができます



カバーをかけてマッサージすると当たりを柔らかにできます。また使い終わったらカバーをかけて、コンパクトに収納できます。

### 気持ちいいふわふわ生地




ふわふわ生地の心地よさはクセになります。お部屋なじみもよく、使わないときも自然に置いておけます。

## 手軽に、使いやすい

### カンタン操作

電源ボタンを押すだけでもみが開始します。

マッサージが開始します

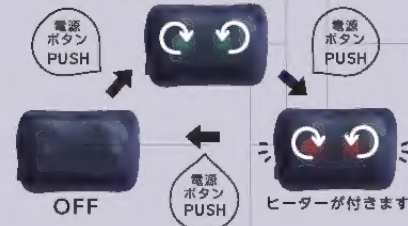

### オートオフ機能、電気代も経済的

15分

1ヶ月  
約3円

マッサージ開始から15分経過すると、自動的に止まります。もみ過ぎやもみ返しを予防します。月々の電気代は、1日15分のご使用で約3円と経済的。※電気料金単価27円/kwhで算出

### 疲れた部位にフィット

首・肩



手もみのようにぐいぐい押して、疲れた肩を押します。

ふくらはぎ・ふともも



疲れた脚をもみ玉にあてて1日の疲労を置します。

腰・背中



腰や背中にフィットして、しっかりとみほぐします。